



**DuoTEMP<sup>TM</sup>**   
*dual cure temporary filling material*

## Dobbelt sikkerhed gør dig smilende!

- Dualhærdende
- God marginal pasform
- Let at fjerne
- Ét materiale med talrige indikationer



DuoTEMP er et dualhærdende, eugenolfrit, hvidt provisorisk fyldningsmateriale på basis af zinkilte og zinksulfat. DuoTEMP giver en optimal beskyttelse mod indtrængning af bakterier, og det er et af de første alt-i-ét provisoriske materialer, der kan afbinde ved påvirkning af såvel lys som spyt. Denne løsning giver større fleksibilitet, idet den tillader patienten at genoptage sine daglige gøremål med det samme. DuoTEMP har desuden en behagelig duft, som glæder både tandlæge og patient.

### ► Dobbelt sikkerhed

#### • Dualhærdende

Efter kun 40 sekunders lyspolymerisering kan patienten med det samme belaste materialet. Derefter vil DuoTEMP fortsætte automatisk med en total kemisk polymerisering pga. spyttets indvirkning.

#### • Perfekt marginal forsegling pga. en let ekspansion

Reducer indtrængning af bakterier

### ► Ét materiale med mange indikationer

Forenkler lagerhold og valg af materiale

- Provisoriske fyldninger
- Provisorisk aflukning ved endodonti
- Provisorisk forsegling af præparationer til indlæg og onlays

### ► Naturlig, tandlignende fornemmelse

DuoTEMP's høje overfladehårdhed får det til at føles som en naturlig tand – det minimerer irritation og øger patientens komfort.

### ► Yderligere fordele

- Indeholder zinkilte og fluorid – det giver yderligere beskyttelse.
- Eugenolfrit – ingen påvirkning af kompositens polymerisering
- Radiopakt

### Ordre-information

**5830** DuoTEMP intro-æske

2 sprøjter á 5 g, Coltène separator 5 ml

**5831** DuoTEMP enkeltpakning

1 sprøjte á 5 g

**7090** DuoTEMP storpakning

5 sprøjter á 5 g

**7235** Coltène separator, intra-oral, 5 g


### ► Marginal forsegling – en sammenligning



DuoTEMP™



IRM\*

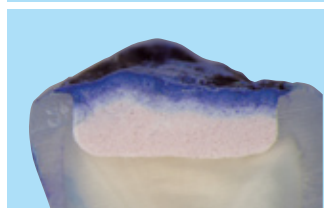

Cavit\*



Fermit\*

Gennemskårne ekstraherede humane molare blev fyldt med DuoTEMP og derefter nedsænket i farvestoffet methylenblåt for at påvise effekten af den marginale forsegling. DuoTEMP viste fremragende forseglingsegenskaber.

Kilde: Interne data

\* Ikke varemærke for Coltène/Whaledent

### ► Let, tidsbesparende applikation



En komponent uden sammenblanding. God retention i kaviteten. Let at fjerne.

www.coltenewhaledent.com  
© 2008 Coltène/Whaledent AG

#### Repræsentant for Danmark

Lone Astrup  
Tietgensplads 14  
8000 Århus C  
Mob Phone: +45 (0)21 73 37 52  
Fax No: +45 (0)86 76 06 05  
astrup@coltenewhaledent.dk

#### Coltène/Whaledent Inc.

235 Ascot Parkway  
Cuyahoga Falls, Ohio 44223/USA  
Tel. +1 330 916 8800  
Fax +1 330 916 7077  
productinfo@coltenewhaledent.com

#### Coltène/Whaledent

Vertriebsservice und Marketing GmbH  
Feldwiesenstrasse 20  
9450 Altstätten/Switzerland  
Tel. +41 (0)71 757 53 00  
Fax +41 (0)71 757 53 01  
office@coltenewhaledent.ch

**coltène**  
**whaledent**